

# MegaBee™

Tablette de communication électronique portable

# Manuel

# Notice d'utilisation

La tablette de communication MegaBee permet une communication facile et fréquente entre un utilisateur qui ne peut pas parler mais qui écrit bien ("le rédacteur") et une aide à domicile, un ami ou une infirmière (le "lecteur").

Les caractères étant définis par le rédacteur, le lecteur est en mesure de les saisir et de construire des mots qui apparaissent sur un petit écran.

Ce manuel comprend deux parties : l'utilisation de base et les fonctions avancées. L'utilisation de base correspond à tout ce que vous devez savoir pour établir rapidement une communication. Les fonctions avancées correspondent à certaines fonctions permettant de revoir le texte, de régler l'écran et d'utiliser MegaBee en interface avec des ordinateurs pour élargir la communication.

## Utilisation de MegaBee

Le lecteur tient MegaBee à deux mains, avec les boutons de couleur dirigés vers lui et il regarde le rédacteur à travers l'espace situé au centre de l'appareil. Il est alors facile de suivre le mouvement des yeux du rédacteur. Les pouces de chaque main doivent se tenir confortablement au dessus des boutons.


Mettez l'unité sous tension à l'aide du bouton oval noir ON/OFF situé du côté gauche. Toutes les lumières vont s'allumer une fois et le texte 'MegaBee' apparaîtra sur l'écran.

Celui-ci disparaîtra après deux secondes.

Bouton ON/OFF

Ecran



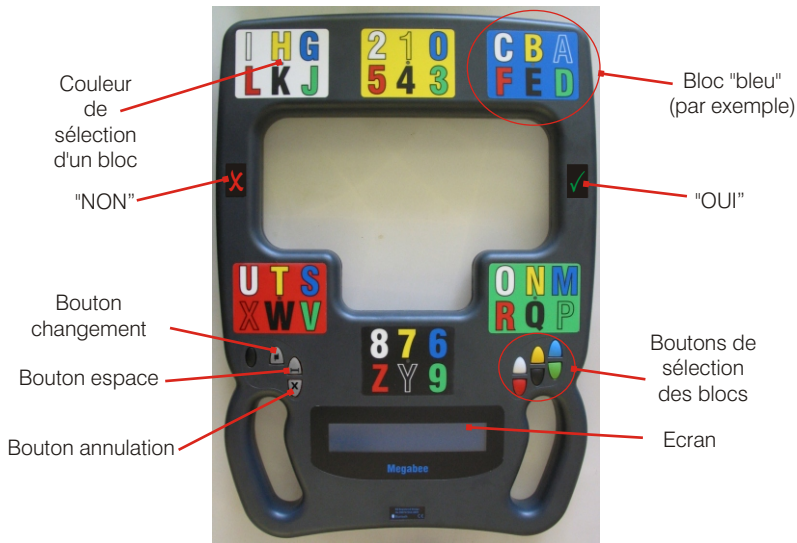

Sélectionner un caractère nécessite une interaction séquentielle entre le lecteur et le rédacteur alors qu'ils se regardent mutuellement à travers l'appareil. Le procédé peut être résumé comme suit :

- |               |   |
|---------------|---|
| 1) Rédacteur: | Il regarde la lettre ou le nombre et cligne des yeux                                |
| 2) Lecteur:   | Il confirme la sélection en disant la couleur du bloc                               |
| 3) Lecteur:   | Il presse sur le bouton "bloc" correspondant (il s'allumera)                        |
| 4) Rédacteur: | Il regarde le bloc qui est de la couleur de la lettre qui vient d'être sélectionnée |
| 5) Lecteur:   | Il presse sur le bouton "bloc" correspondant  |
| 6)            | Le caractère apparaît sur l'écran   |

L'étape '2' pourra être omise lorsque le lecteur et le rédacteur seront expérimentés. Une méthode alternative de confirmation, comme regarder le symbole "OUI" peut être utilisée si le rédacteur a du mal à cligner.

## Exemple

Le procédé pour épeler le mot "hot" :

### REDACTEUR

Regardez la lettre 'h' et clignez

'h' est jaune, donc regardez maintenant le bloc jaune et clignez

'h' apparaît sur l'écran

Regardez la lettre 'o' et clignez

'o' est blanc, donc regardez maintenant le bloc blanc et clignez

'o' apparaît sur l'écran

Regardez la lettre 't' et clignez

't' est jaune, donc regardez maintenant le bloc jaune et clignez

't' apparaît sur l'écran

Le mot 'HOT' apparaît maintenant sur les écrans du lecteur et du rédacteur

### LECTEUR

('h' est la lettre jaune dans le bloc blanc)  
Dîtes "blanc" et pressez sur le bouton blanc  
La lumière de sélection du bloc blanc s'allume

Pressez sur le bouton jaune.

('o' est la lettre blanche dans le bloc vert)  
Dîtes "vert" et pressez sur le bouton vert  
La lumière de sélection du bloc vert s'allume

Pressez sur le bouton blanc.

('t' est la lettre jaune dans le bloc rouge)  
Dîtes "rouge" et pressez sur le bouton rouge  
La lumière de sélection du bloc rouge s'allume

Pressez sur le bouton jaune.

## Abréviations/Raccourcis

Pour accélérer la communication vous pouvez utiliser des abréviations, quand vous vous serez familiarisé à la sélection de lettres et nombres. Les abréviations sont composées d'une lettre suivie d'un nombre. Une liste d'abréviations par défaut est déjà installée sur votre MegaBee, mais vous pouvez facilement la personnaliser (voir Fonctions Avancées).


Un exemple d'abréviation :

D7 = BOIRE

C5 = PEUX TU ME DONNER

# Erreurs, espaces et annulation

Trois méthodes supplémentaires de communication sont nécessaires pour une utilisation autre que la saisie de caractères.

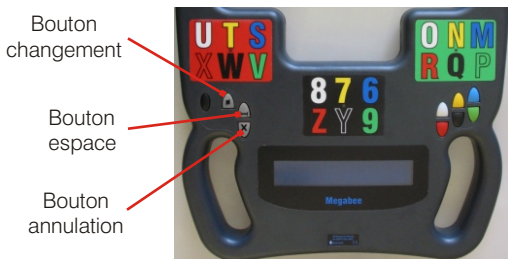

## Changement

Si le lecteur sélectionne un mauvais bloc de départ rédacteur regarde directement le lecteur et cligne deux fois. Cela signifie que le bloc sélectionné n'est pas le bon. Le lecteur doit presser sur le bouton "changement" pour retourner au mode de sélection d'un bloc.

## Espaces

Pour insérer un espace, le rédacteur regarde directement le lecteur et cligne une fois. Le lecteur presse sur le bouton "espace" et un espace est inséré dans le texte.

## Annulation de caractère (ou d'abréviation)

Pour annuler un caractère, ou une abréviation, le rédacteur regarde directement le lecteur et ferme les yeux plus longtemps (disons une petite seconde). Le lecteur presse sur le bouton "annulation" et le dernier caractère ou l'abréviation est retiré de l'écran.

## Annuler tout la conversation

Pour annuler tout un message affiché à l'écran (et dans la mémoire) il suffit simplement d'éteindre le MegaBee et de le redémarrer.

## Indication de batterie faible et chargement

MegaBee doit être rechargé toutes les nuits avec le chargeur de batterie fourni. (n'utilisez pas un autre chargeur).

Pour charger la batterie, connectez MegaBee à une prise secteur en utilisant le petit connecteur. Lorsque MegaBee est en charge, une lumière verte clignote dans le bloc "rouge", ce qui indique qu'un cycle de charge est en cours. Lorsque ce cycle est terminé la lumière verte devient fixe. Une lumière fixe signifie que la charge est suffisante pour une journée d'utilisation.



Un avertissement apparaîtra sur l'écran pour indiquer qu'il est recommandé de mettre la batterie en charge (le curseur se change en un bloc carré blanc).

MegaBee peut être utilisé sans problème pendant qu'il est en charge.

## Economie d'énergie

Pour économiser de l'énergie, MegaBee éteint automatiquement certaines caractéristiques si elles n'ont pas été utilisées depuis un certain temps.

L'éclairage de fond s'éteint après 30 secondes d'inactivité. Ceci met l'écran en veille, mais conserve tout le texte écrit. L'éclairage de fond revient automatiquement dès que l'on presse sur une touche.

Après une certaine période, d'inactivité l'unité entière s'éteint (vous pouvez personnaliser le délai de mise en veille voir Fonctions Avancées). Pour reprendre l'utilisation, il faut presser sur le bouton ON/OFF.

## Autres fonctions et interface avec un ordinateur

D'autres fonctions disponibles pour le lecteur facilitent et élargissent l'utilisation de MegaBee. Elles sont toutes accessibles au moyen du bouton noir "fonction" qui montrent ensuite un certain nombre d'options à l'écran :

1. Appuyez sur Fonctions (noir) pour entrer dans le menu fonction
2. Appuyez sur Haut, Bas pour naviguer dans les options
3. Appuyez sur Entrée pour valider une option

Puis :

4. Appuyez sur Haut, Bas pour naviguer dans les paramètres
5. Appuyez sur Entrée pour valider un paramètre

Bouton FONCTION

Bouton ENTRÉE

Bouton HAUT

Bouton BAS



## Contraste

Permet de régler le contraste de l'écran.

## Éclairage de fond

Permet d'allumer ou éteindre l'éclairage de fond de l'écran. Eteindre l'éclairage de fond est utile si vous êtes à la lumière du jour ou dans une pièce fortement éclairée.

## Bluetooth

Le Bluetooth permet la communication entre MegaBee et un ordinateur. Si vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, la mise en position "off" prolongera la vie de la batterie (voir le fichier PChelp sur le CD).

## Mode défilement

Ce réglage permet de parcourir toute l'écriture de la session par défilement sur les écrans. Vous ne pouvez pas ajouter de caractères en mode défilement.

## Chargement

Ce mode permet d'envoyer le texte à un PC. Bluetooth doit être actif pour que cette commande fonctionne et la connexion Bluetooth du PC doit être établie (voir le fichier PChelp sur le CD).

## Mode

Permet de sélectionner le mode texte ou image. (voir le fichier 'Utilisationimages' sur le CD).

## Vocabulaire

Quand ce réglage est actif, il permet à l'utilisateur de charger du vocabulaire dans la mémoire du MegaBee (voir le fichier PChelp sur le CD).

## Délai de mise en veille

Le délai de mise en veille est la durée pendant laquelle MegaBee peut rester inutilisé avant de s'éteindre. Un délai de 1 ou 2 minutes est utile pour des communications fréquentes parce qu'il prolonge la durée de vie de la batterie. Pour une communication avec un ordinateur, un délai de 5 minutes est raisonnable. Le délai maximum de mise en veille est de 15 minutes.

## Extinction

Ce choix permet d'éteindre le MegaBee.

*Documentation et logiciel peuvent être chargés à partir de*  
[www.megabee.net](http://www.megabee.net)



MegaBee est une marque déposée de  
E2L Limited.

Caractéristiques susceptibles de modification  
©E2L Products Limited 2009-2010

**Fabriqué en Europe**

EU Registered Design  
No 00074766-0001

